



Advanced Dental Designs, Inc.
 22640 Goldencrest Drive, #106
 Moreno Valley, CA 92553 • USA
 USA & Canada: 800.232.2849
 International: +001 951.579.4535
 www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
 2595 AM The Hague The Netherlands



Delar Wax Instructions






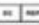
Delar Registration Wax (REF: DL600008, DL600013, DL600015, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)

Delar Bite Registration Wax was designed specifically for obtaining jaw relation records. Heat in thermostatically controlled water bath at 58° C (135° F) for 1 minute. After obtaining jaw relation records, place in cold water to regain maximum hardness quickly and to facilitate trimming off excess wax. For Single Use Only. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

 Advanced Dental Designs
 22640 Goldencrest Dr, #106
 Moreno Valley, CA 92553
 (800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
 2595 AM The Hague
 The Netherlands



 LOT	Batch code	 Manufacturer
 REF	Catalog #	 EU authorized rep

Item #PK970022

Doc Revision#: L-DELAR REV B 02/15/24

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Doc Control #L-Delar Rev B 3/30/24



Advanced Dental Designs, Inc.
 22640 Goldencrest Drive, #106
 Moreno Valley, CA 92553 • USA
 USA & Canada: 800.232.2849
 International: +001 951.579.4535
 www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
 2595 AM The Hague The Netherlands



Instrucciones del Delar Wax



Cera de registro de mordida Delar (REF.: DL600008, DL600013, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)

La cera de registro de mordida Delar fue diseñada específicamente para la obtención de registros de relación mandibular. Caliente en baño de agua con termostato a 58 °C (135 °F) durante 1 minuto. Después de obtener los registros de la relación mandibular, colóquelos en agua fría para que recuperen rápidamente su máxima dureza y para facilitar el recorte del exceso de cera. Para un solo uso.



Advanced Dental Designs
 22640 Goldencrest Dr, #106
 Moreno Valley, CA 92553
 (800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
 2595 AM La Haya
 Países Bajos

LOT	Batch code		Manufacturer
REF	Catalog #		EU authorized rep



Artículo n.º PK970022

Rev. del doc. n.º: L-DELAR REV. A 16/1/2023

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente

Doc Control #L-Delar Rev B 3/30/24



Advanced Dental Designs, Inc.
 22640 Goldencrest Drive, #106
 Moreno Valley, CA 92553 • USA
 USA & Canada: 800.232.2849
 International: +001 951.579.4535
 www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
 2595 AM The Hague The Netherlands




Instructions pour Delar Wax





Cire pour enregistrement de l'occlusion Delar (REF : DL600008, DL600013, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)

La cire pour enregistrement de l'occlusion Delar a été spécifiquement conçue pour obtenir des enregistrements de la relation intermaxillaire. Chauffez la cire dans un bain d'eau contrôlé par thermostat à 58 °C (135 °F) pendant 1 minute. Après avoir obtenu les enregistrements de la relation intermaxillaire, plongez-les dans l'eau froide pour les rigidifier un maximum rapidement et ainsi faciliter le retrait du surplus de cire. À usage unique.

 Advanced Dental Designs
 22640 Goldencrest Dr, # 106
 Moreno Valley, CA 92553
 (800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
 2595 AM La Haye
 Pays-Bas

LOT	Batch code		Manufacturer
REF	Catalog #		EU authorized rep



Article #PK970022

Révision de document # : L-DELAR REVA 01/16/23

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est/sont établi(s).

Doc Control #L-Delar Rev B 3/30/24



Advanced Dental Designs, Inc.
22640 Goldencrest Drive, #106
Moreno Valley, CA 92553 • USA
USA & Canada: 800.232.2849
International: +001 951.579.4535
www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
2595 AM The Hague The Netherlands



Istruzioni per Delar Wax



Cera di registrazione del morso Delar (REF: DL600008, DL600013, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)

La cera di registrazione del morso Delar è stata progettata specificamente per ottenere registrazioni delle relazioni mascellari. Riscaldare a bagnomaria termostato a 58 °C (135 °F) per 1 minuto. Dopo aver ottenuto le registrazioni delle relazioni mascellari, metterle in acqua fredda per recuperare rapidamente la massima durezza e per facilitare l'eliminazione della cera in eccesso. Solo per uso singolo.



Advanced Dental Designs
22640 Goldencrest Dr, #106
Moreno Valley, CA 92553
(800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595 AM L'Aia
Paesi Bassi

LOT	Batch code		Manufacturer
REF	Catalog #		EU authorized rep



Articolo n. PK970022

N. revisione doc.: L-DELAR REV A 16/01/23

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Controllo doc. n. L-Delar Rev B 3/30/24



Advanced Dental Designs, Inc.
 22640 Goldencrest Drive, #106
 Moreno Valley, CA 92553 - USA
 USA und Kanada: 800.232.2849
 International: +001 951.579.4535
 www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
 2595 AM Den Haag, Niederlande



Delar Wax - Anweisungen



Delar Registrierwachs (REF: DL600008, DL600013, DL600015, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)


Das Delar Bissregistrierwachs wurde speziell zur Erfassung der Kieferrelation entwickelt. Im per Thermostat kontrollierten Wasserbad bei 58 °C (135 °F) 1 Minute lang erhitzen. Legen Sie die Abdrücke zur Kieferrelation in kaltes Wasser, um schnell die maximale Härte zu erreichen und das Abschneiden überschüssigen Wachses zu erleichtern. Nur zum einmaligen Gebrauch. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.



Advanced Dental Designs
 22640 Goldencrest Dr, #106
 Moreno Valley, CA 92553
 (800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
 2595 AM Den Haag
 Niederlande

LOT	Batch code		Manufacturer
REF	Catalog #		EU authorized rep

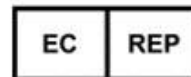

Artikel Nr. PK970022

Doku-Revision Nr: L-DELAR REV B 02/15/24

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.



Advanced Dental Designs, Inc.
22640 Goldencrest Drive, #106
Moreno Valley, CA 92553 • USA
USA & Canada: 800.232.2849
International: +001 951.579.4535
www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
2595 AM The Hague The Netherlands



Instruções para Delar Wax



Delar - cera de registo de mordida (REF.: DL600008, DL600013, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)

A cera de registo de mordida da Delar foi desenvolvida especificamente para gravar a relação entre as mandíbulas. Aquecer num banho de água de 58 °C (135 °F), controlado por termostato, durante 1 minuto. Depois de gravar a relação entre as mandíbulas, colocar em água fria para obter, de novo, rapidamente a maior dureza e para facilitar a remoção da cera em excesso. Apenas para uma única utilização.



Advanced Dental Designs
22640 Goldencrest Dr, 106
Moreno Valley, CA 92553
(800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595 AM The Hague
Países Baixos

LOT	Batch code		Manufacturer
REF	Catalog #		EU authorized rep



Art. n.º PK970022

N.º de revisão do doc.: L-DELAR REVA 01/16/23c

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente está domiciliado.

Controlo do documento n.º L-Delar Rev B 3/30/24



Advanced Dental Designs, Inc.
22640 Goldencrest Drive, #106
Moreno Valley, CA 92553 • USA
USA & Canada: 800.232.2849
International: +001 951.579.4535
www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
2595 AM The Hague The Netherlands



Instrukcja obsługi Delar Wax



Delar Bite Registration Wax (wosk Delar do rejestracji zgryzu) (Nr ref.: DL600008, DL600013, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)

Delar Bite Registration Wax jest przeznaczony specjalnie do rejestrowania relacji anatomicznych szczęki. Podgrzewać w regulowanej termostatem łaźni wodnej w temperaturze 58°C (135°F) przez 1 minutę. Po zarejestrowaniu zapisów relacji anatomicznych żuchwy umieścić w zimnej wodzie, aby szybko uzyskać ponownie maksymalną twardość i ułatwić usunięcie nadmiaru wosku. Wyłącznie do jednorazowego użytku.



Advanced Dental Designs
22640 Goldencrest Dr, #106
Moreno Valley, CA 92553
(800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595 AM Haga
Holandia

LOT	Batch code		Manufacturer
REF	Catalog #		EU authorized rep



Pozycja nr PK970022

Nr wersji dok.: L-DELAR WER. A 01/16/23



Advanced Dental Designs, Inc.
22640 Goldencrest Drive, #106
Moreno Valley, CA 92553 • USA
USA & Canada: 800.232.2849
International: +001 951.579.4535
www.ad2usa.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - #123
2595 AM The Hague The Netherlands



Instrucțiuni privind Delar Wax



Ceară de înregistrare Delar Bite (REF: DL600008, DL600013, DL600016, DL600021, DL600023, DL600024, DL600025, DL600026, DL600028, DL600030)


Ceara de înregistrare a mușcăturii Delar a fost concepută special pentru obținerea înregistrărilor rapoartelor maxilare. Se încălzește în baie de apă controlată termostatic la 58° C (135° F) timp de 1 minut. După obținerea înregistrărilor rapoartelor dintre maxilare, se introduce în apă rece pentru a-și recăpăta rapid duritatea maximă și pentru a facilita îndepărtarea excesului de ceară. De unică folosință.



Advanced Dental Designs
22640 Goldencrest Dr, #106
Moreno Valley, CA 92553
(800) 232-2849

MedEnvoy Gloval B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595 AM Haga
Olanda

LOT	Batch code	Manufacturer
REF	Catalog #	EU authorized rep

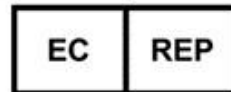

Art. #PK970022

Cod revizie doc.: L-DELAR REV A 16/01/23

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Doc Control #L-Delar Rev B 3/30/24